
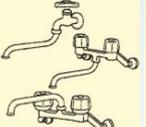


## ほとんどの蛇口に簡単に取り付けできます

### ■取り付け可能な蛇口の例

	丸型自在(標準型)	外ネジ型キャップ付	内ネジ型キャップ付	ストレート型
蛇口種類				
取付蛇口				

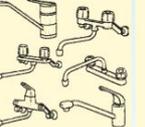


医療用アルカリイオン水生成器

Artemis  
Fontana  
フオンターナ



## 浄水カートリッジ

繊維活性炭・銀添粒状活性炭・ゼオライトボール・鉛除去対応イオン交換繊維により、水道水に含まれる不純物を除去します。

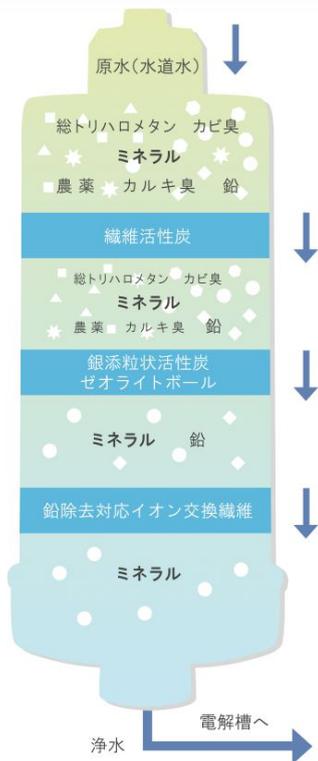

## 仕様

型番：AM-358  
販売名称：アーテミス フオンターナ  
医療機器承認番号：20800BZZ00226A15  
給水仕様：吐水蛇口分岐式（Uターン方式）  
給水接続：分岐水栓セット（シャワー付）  
定格：AC100V 2.5A  
本体寸法：幅240×高さ295×奥行110（mm）  
本体重量：約5kg  
構成：据置き・壁掛け兼用 浄水器内蔵  
操作方法：押ボタンスイッチ（電解強度・アルカリイオン水/酸性水・メロディー）  
最高使用水温：約30℃  
使用水道圧範囲：0.07～0.59Mpa（0.7～6.0kgf/cm<sup>2</sup>）  
電解方式：連続式電解方式（流量センサー内蔵）  
電解：〈処理水量〉4.5～5L/min（原水）  
〈電解能力切替〉5段階設定（浄水・1・2・3・強電解）  
〈電解槽〉リバーシブル電極  
〈電解洗浄〉オートクリーニング方式（マイコン制御による自動洗浄方式・通水量に応じて洗浄）  
浄水器：〈処理能力〉標準使用状態を1日40Lとして約1年間（原水残留塩素濃度2ppmに対し0.4ppmに達するまでの水量）  
〈カートリッジ表示〉流量積算により14tで交換時期予告LED点滅、積算15tでLED点灯  
〈ろ過材料〉銀添粒状活性炭・ゼオライトボール・鉛除去対応イオン交換繊維・亜硫酸カルシウム  
〈交換方式〉ワンタッチ交換システム  
電源保護装置：ガラス管ヒューズ

**ご使用上の注意** ■正しくお使いいただくために、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。■アルカリイオン水は体質に合わせて調整してお飲みください。■酸性水は飲用しないでください。■硬水を軟水に変えることはできません。■本器は日本国内の飲用可能な水を対象としております。水道法基準に不適合な原水は処理できません。■お湯を通さないでください。■地域によって塩素除去能力に多少の差があります。

・アーテミス フオンターナ AM-358 定価 258,000円＋税  
・交換用カートリッジ AM-F358 定価 13,000円＋税

フオンターナは健康の泉

発売元  
株式会社 アーデンモア ARDEN MORE  
〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉5丁目3番8号  
TEL.028-662-7274(代)

取扱店

ARDEN MORE

管理医療機器 承認番号 20800BZZ00226A15

# フォントナー 泉

清らかな水を求めて人が集まるところ。  
わき出る泉の水はのどを潤し、  
疲れをいやしてくれます。

アーテミス フォントナーは  
ストレスの多い現代に生きる  
みなさまのための健康の泉です。

おいしい水で  
すこやかな毎日をお過ごしください。



おいしくて、身体にやさしいフォントナーの水。  
それは、アルカリイオン水で還元水だから

**アルカリイオン水：** 血液はpH7.40の弱アルカリ性に保たれています。一般に水道水は中性に調整してありますが、これが〈フォントナー〉の電解槽を通過する間に電気分解され、血液と同じアルカリ性の水に変わります。この〈フォントナー〉で電気分解された水にはカルシウム・マグネシウム・カリウム・ナトリウムなど、身体の働きに不可欠なミネラル分が豊富に含まれていて、水そのものに味わいがあります。

**還元水：** 生活上の様々なストレスにより発生する活性酸素は、細胞を傷つけ、老化を早めます。ところが、活性酸素は電子と結びつくと安全な酸素に戻ることができるのです。〈フォントナー〉の水は電気分解の作用により電子がたくさん含まれている還元水で、身体が喜ぶやさしい水です。

**胃腸症状の改善に役立ちます：** 管理医療機器として承認されている〈フォントナー〉の水には制酸作用があります。また、消化不良・胃腸内異常発酵・慢性下痢・胃酸過多の症状への効能・効果が認められています。

**不純物を取り除いた清潔な水を電気分解します：** 〈フォントナー〉のカートリッジには繊維活性炭・銀添粒状活性炭・ゼオライトボール\*・鉛除去対応イオン交換繊維を使用しています。残留塩素・トリハロメタン・カビ臭・農薬・鉛などの不純物をしっかり除去してから、おいしい水に電気分解してくれます。\*ゼオライトは放射性セシウムの吸着などにも利用されています。

## 身体に入る水分はすべてフォントナーのおいしい水で

健康のために電子が最も多い状態で水分を摂るには、温めたり冷やしたりせずに、フォントナーの水をそのまま飲むことをお勧めします。

野菜洗い、米とぎにもフォントナーの水をお使いください。ご飯・味噌汁・スープ・煮物など料理の水にお使いいただくと、いっそうおいしくなります。緑の野菜を色鮮やかにゆがいたり、あく抜きをするのにも最適です。もちろんティータイムにもお使いください。

**酸性水の利用法：** 副吐水として出てくる酸性水は洗浄・除菌に適しているのです。洗面桶にためておくことで食器洗いに利用できます。また、お肌をひきしめるアストリンゼント効果が認められていますので、洗顔や手洗い・入浴などにもお使いください。

## おいしい水をたっぷり使えるたのもしさ

- 最大で毎分4Lのアルカリイオン還元水を生成できます。
- しかも、最長30分の長時間連続使用が可能です。
- カートリッジは4人家族で約1年間使用可能です。

※水質ならびに使用条件により、電解力やカートリッジの浄水機能には差が生じます。

## パネル表示で簡単・安全操作

●電解槽の自動洗浄中はランプが点灯します。電解使用時間に応じて洗浄時間が調整されます。

●電解強度に対してバランスの良い水量が一目でわかります。

●流量センサーが使用水量を計測して、カートリッジ交換時を自動的にお知らせします。

●マイコン制御で過電流を防止します。万一、過電流が発生したり、電解質を多く含む水が通過した場合は、休止中ランプでお知らせします。

●スイッチボタンを押すだけで電解強度を簡単に調節できます。

●飲用に適さない酸性水使用時は、メロディーでお知らせします。



※熱水防止機構付の分岐水栓で、温水の通水を防ぎ、電解槽を傷めません。

## 完全自動洗浄でいつもおいしい水

- 制菌力に優れた銀添粒状活性炭を、カートリッジのろ過剤に使用しているので、不純物が取り除かれた清潔な水が電気分解されます。
- 通水後は毎回自動的に電極板が洗浄されるので、電解槽内にカルシウムなどが付着しにくく、電解能力の低下を防ぎます。

## 「Uターン方式」なので蛇口から離して設置でき、しかも幅24cmのスリム設計です。

- 据え置きも壁掛けもOK。ホースの長さを調整すれば、シンクの水はねやガス台の油污れを避けて、置き場所を自由に選べます。

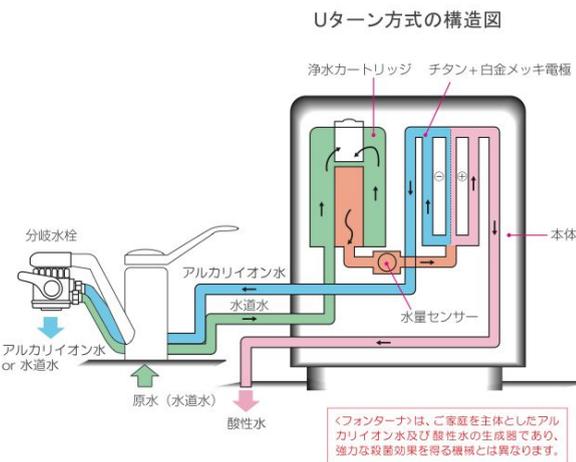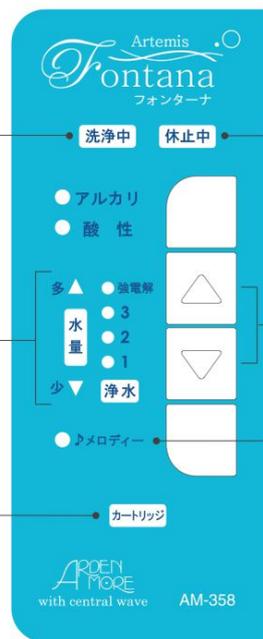

〈フォントナー〉は、ご家庭を主体としたアルカリイオン水及び酸性水の生成器であり、強力な殺菌効果を得る機構とは異なります。